

簡易型嗅覚リハビリテーション補助器


嗅覚は鼻から空気を吸い込んで匂いを感じることができます。

訓練することで嗅覚は戻ってきます

この嗅覚リハビリ補助器は悠声会会員の中川さんが考案してくれました。

鼻から空気が吸入できているかどうかを調べる道具です。

簡易嗅覚リハビリ補助器は自分でも作ることができますのでチャレンジして下さい

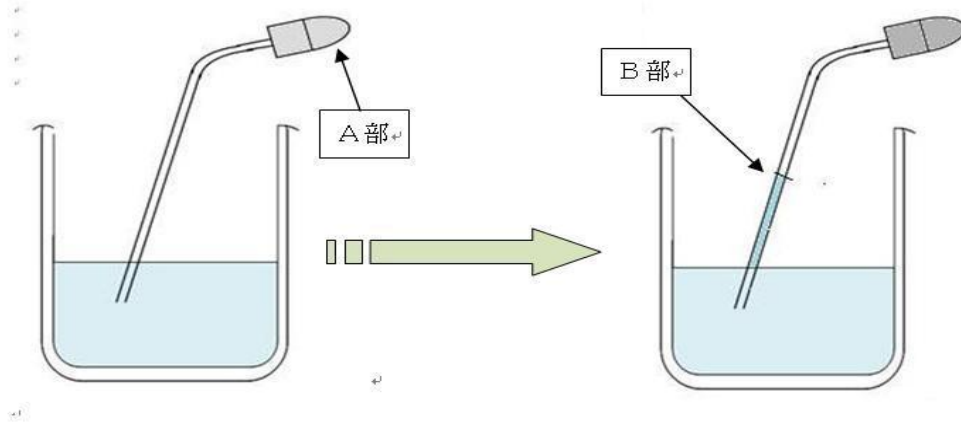

方法

1. A部を片方の鼻の穴に入れる
2. もう片方の鼻の穴を指で塞ぐ
3. 口を閉じて、舌の後方を下方にポンプの要領で動かします
(下方に下顎をうごかし、戻すことをくり返す)
4. 水が管を上がってくれば、空気を吸入できているのが分かる B部

作り方

- 容器はコップ等で可
- チューブは市販のビニールチューブ
- 吸引部は小児用吸引管のオリーブ（永島医療機器）を利用

制作、使用に関しては各人の責任で実施して下さい。

ここにビニール
チューブを差し込む

吸引用オリーブ N-40

大	10603500
中	10603501
小	10603502
極小	10603503

70 (mm)
65
59
56

吸引セット ※オリーブはN-40を使用

小児用吸引管 N-42 [構成・N-40+シリコンチューブ+A-2]
(シリコンチューブ・10163404)

大	10603600
中	10603601
小	10603602
極小	10603603

永島医科器械株式会社
東京都文京区本郷5-24-1
Tel 03-3812-1271 Fax 03-3812-1358
吸引用オリーブ 各1個 1,100円
吸引セット 各1セット 1,500円
送料別途
HP アドレ <http://www.nagashima-medical.co.jp/>